

DENTAPEN®




ANESTESIA DENTAL
Sin Dolor Sin Esfuerzo Sin Cables

PARA SUS PACIENTES

“El criterio número uno para elegir un dentista es:
Un dentista capaz de administrar anestesia sin dolor.”

Cómo se juzga a los dentistas, St Georges J, Dent Today, 2004.

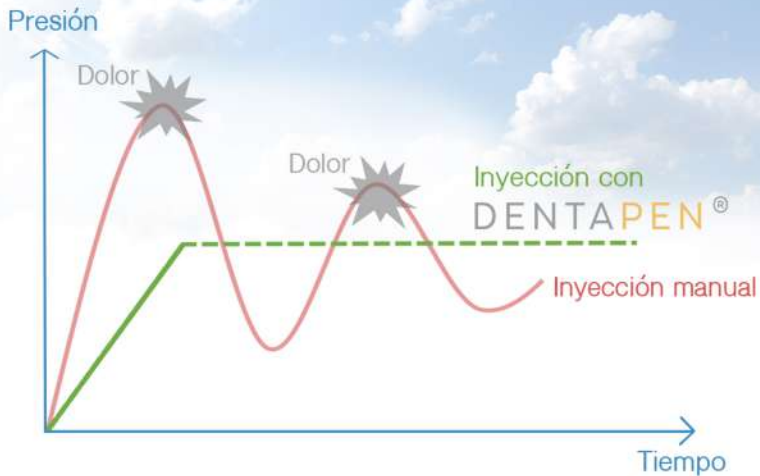

“Los resultados de ésta evaluación indican que usar C-CLAD
resulta en menos dolor y anestesia más efectiva.”

*Administración de anestesia local controlada por computadora para una experiencia sin dolor:
una reseña de literatura, Eun-Jung Kwak, Nan-sim Pang, Jin-Hyung Cjo, Bock Young Jung,
Kee-Deog Kim y Wonse Park Dental Anesth Pain Med. 2016 Jun; 16(2):81-88.*



DENTAPEN®

BARRIL GIRATORIO
para una fácil
colocación de bisel



AUTOCLAVABLE
bajos costos de operación



BATERÍA
hasta 100 pacientes

2 AÑOS DE GARANTÍA


Kit Completo Dentapen®:

Eje métrico Ref. DK01.2/M

Eje Imperial Ref. DK01.2/ I

Opcional:

Fundas protectoras x 250 PS01

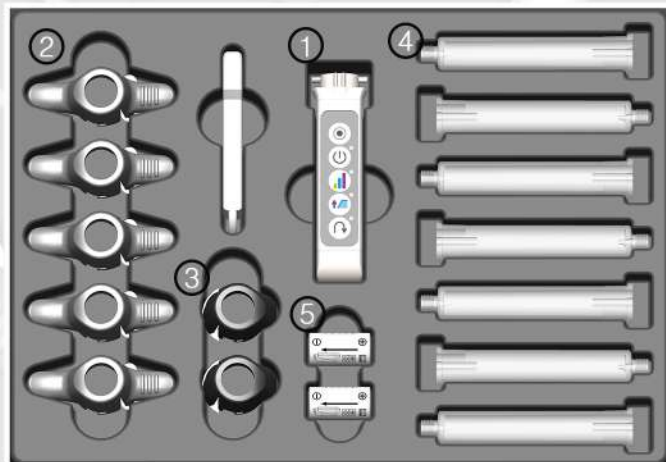

- ① Dentapen® x1
- ② Agarre Dedos x5
- ③ Agarre dedos para bloqueo de nervios x2
- ④ Soporte para Carpule 1.7ml métricas o imperial eje x7
- ⑤ Baterías x3

Incluye:
25 Fundas protectoras

Diseñado para la EFICIENCIA



Accesorios autoclavables

Universal: todas las técnicas, agujas métricas e imperiales

2 vías de activación: activación dedo índice o pulgar

Cargada por batería

Compacto y ligero (50g. con batería)

Barril giratorio para una fácil colocación de bisel

Configuración fácil



Encendido/Apagado
Nivel de carga de la batería

★ 100% ★ 20% ★ 10%



★ Lenta 90 s/mL
★ Media 60 s/mL
★ Rápida 30 s/mL



★ Modo intraligamentario
★ Modo de aceleración = flujo de anestesia aumenta gradualmente para una experiencia totalmente indoloro



Aspiración activa
Rebobinar hasta la posición inicial

PARA USTED

Tecnología de vanguardia C-CLAD* para anestésia dental avanzada

- ✓ Fuerza inicial controlada y flujo constante para inyecciones más suaves:
 - Mayor éxito de anestésia
 - Ahorra tiempo y estrés
- ✓ Sensor de retroalimentación de presión computarizado:
 - Ajusta la velocidad de inyección de acuerdo a la presión del tejido
- ✓ Otros beneficios:
 - Permite inyecciones desafiantes
 - Realiza aspiraciones para un procedimiento más seguro
 - Disminuye el riesgo de lesiones relacionados al trabajo: tendinitis, artritis....



MENOS

MÁS



DOLOR



MIEDO



ENTUMECIMIENTO



A PRUEBA
DE NIÑOS



PACIENTES
SATISFECHOS



REFERENCIA



www.dentapen.ch



@dentapen_injector



Juvaplus



Juvaplus

I N J E C T I O N S Y S T E M S

J U V A +

Diseñado y fabricado en Switzerland
info@dentapen.ch - Tel. +41 22 588 66 89