

DENTAPEN®



DENTALE LOKALANÄSTHESIE


Schmerzlos Kabellos Mühelos

FÜR IHRE PATIENTEN

“Das wichtigste Kriterium, bei der Auswahl eines Zahnarztes ist: Ein Zahnarzt, der schmerzlose Injektionen anbieten kann.”

How dentists are judged by patients, St Georges J, Dent Today, 2004.

Druck
(N/mm²)

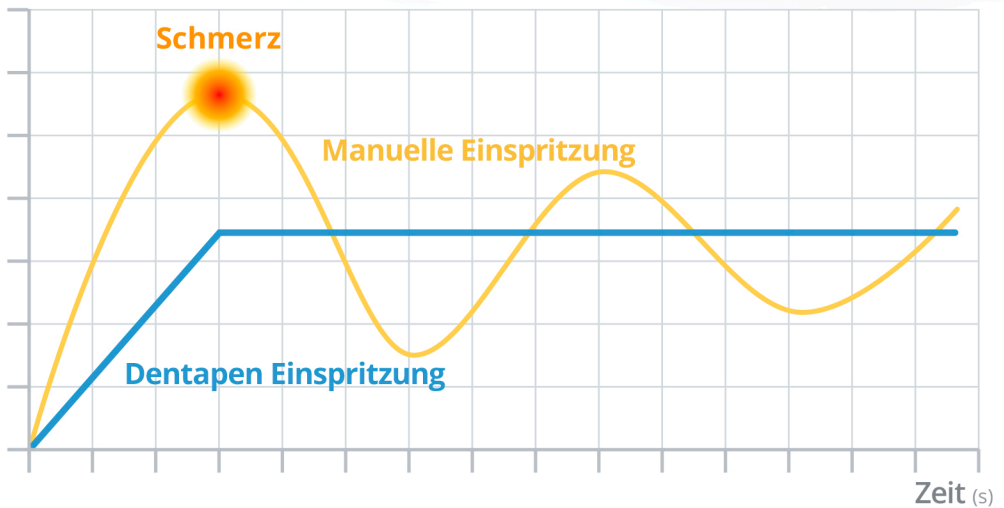

Kontrollierter
Druck

=

Erhöhte
Erfolgsrate

+

Reduzierte
Neben-
wirkungen

+

Minimierte
Betäubung

DENTAPEN®

DREHBAR
zur Erleichterung
der Nadelplatzierung



AUTOKLAVIERBAR
geringe Betriebskosten




2 JAHRE GARANTIE



BATTERIE
Bis zu 100 Patienten

Schutzhüllen verfügbar (Ref. PS01)

Das komplette Dentapen® System:

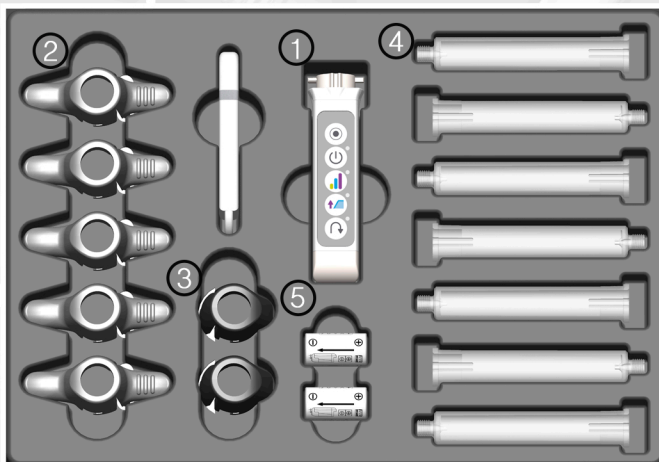

- 1 Dentapen® x1
- 2 Fingerauflage x5
- 3 Fingerauflage
Stiftform x2
- 4 Ampullenhalter
1.7ml x7
- 5 Batterie x3

Enthält:
25 Schutzhüllen

Für die EFFIZIENZ Entwickelt

- ✓ Autoklavierbares Zubehör
- ✓ Universell: alle Techniken
- ✓ Zwei-Wege Griff: Spritze- oder Stift- Griff
- ✓ Batteriebetrieben
- ✓ Kompakt und leicht: nur 50 Gramm
- ✓ Aktive Absaugung

ECHTGRÖßE



Einfaches Einrichten



- ☀ Langsam 90 s/mL
- ☀ Mittel 60 s/mL
- ☀ Schnell 30 s/mL



- ☀ Intraligamentäre Anästhesietechnik (PDA)
- ☀ Progressive Geschwindigkeit



Zurückspulen in die Ausgangsposition

FÜR SIE

Spritzentechnologie für mühelose Anästhesie: computergesteuertes Lokalanästhesiegerät

- ✓ Kontrollierte Anfangskraft und konstanter Fluss für sanftere Injektionen:
 - Erhöht die Erfolgsrate der Anästhesie und spart Zeit
- ✓ Computergesteuerter Drucksensor:
 - Passt die Injektionsgeschwindigkeit druckabhängig an
- ✓ Weitere Vorteile:
 - Ermöglicht anspruchsvolle Injektionen: intraligamentär
 - Führt Aspiration für ein sicheres Verfahren durch
 - Verringert das Risiko von arbeitsbedingten Verletzungen: Tendinitis
 - Beherrscht die Angst des Patienten



WENIGER



SCHMERZ



ANGST



BETÄUBUNG

GARANTIERT



KINDER-
FREUNDLICH



ZUFRIEDENE
PATIENTEN



KUNDEN-
TREUE



www.dentapen.ch



@dentapen_injector



Juvaplus



Dentapen

ROBOTIC SYRINGES

J U V A +

Produktion: Neuenburg - Schweiz

Verkauf: Av. de Miremont 12, Genf - Schweiz

info@dentapen.ch - Tel. +41 22 588 66 89